

RODILLA MECÁNICA SECURE STRIDE M

Referencia C-TK-4004



Rodilla mecánica policéntrica de 4 barras. Dispone de un sistema de bloqueo el cual permite que el usuario la active y desactive dependiendo de la estabilidad que precise en cada momento.



El usuario puede alternar con suma facilidad entre modo libre y modo seguro, con el pulsador incorporado con diseño universal, para ser empleado tanto en amputación derecha como izquierda.

CARACTERÍSTICAS:

- Rodilla policéntrica con sistema ajustable de bloqueo.
- Proporciona una elevada seguridad en postura erguida, muy apropiada para rehabilitación, entrenamiento, o terrenos accidentados.
- El usuario puede activar o desactivar el bloqueo con mucha facilidad.
- El ritmo de flexión y extensión se puede adaptar al usuario.
- Ángulo máximo de flexión de 155°.



DATOS TÉCNICOS	C-TK-4003
Material	Aleación de Aluminio
Altura	160 mm
Peso	850 g
Ángulo Máximo de Flexión	155°
Peso Máximo Tolerable	125 kg
Tipo de Articulación	Mecánica
Nivel de Actividad	Clase 1 a 3

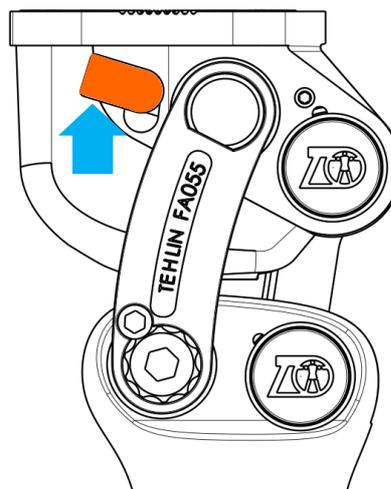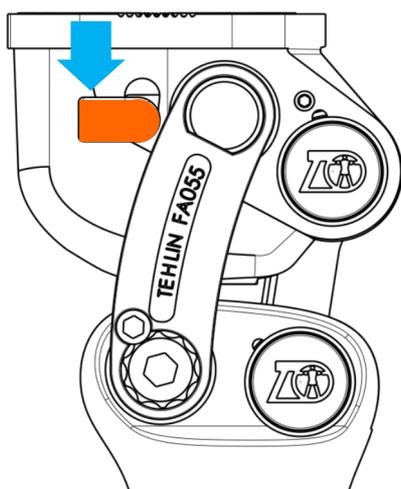

SISTEMA DE BLOQUEO UNIVERSAL